

## Contasol GP rastvor za čišćenje

Rastvor za čišćenje gaspropusnih i tvrdih kontaktnih sočiva.


Contasol GP rastvor za čišćenje se koristi za svakodnevno čišćenje gaspropusnih i tvrdih kontaktnih sočiva.

Efekat čišćenja koji se postiže Contasol GP rastvorom za čišćenje ostvaruje se pomoću sitnih čestica u rastvoru koje eliminišu depozite sa kontaktnog sočiva.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Operite ruke.
2. Protresite bočicu pre svake upotrebe.
3. Stavite sočivo na dlan ruke i stavite nekoliko kapi Contasol GP rastvora za čišćenje na sočivo.
4. Pratiljivo trajajte sočivo 10 do 20 sekundi između vrhova prstiju.
5. Ispirite sočivo temeljno Contasol GP rastvorom za čišćenje ili fiziološkim rastvorom da bi u potpunosti uklonili Contasol GP rastvor za čišćenje sa sočiva.
6. Napunite kasetu za sočiva Contasol GP rastvorom za čuvanje i ostavite sočivo potopljeno u kaseti preko noći ili najmanje 6 sati.

### OPREZ

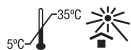

- Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu sa mekim kontaktnim sočivima.
- Ovaj rastvor ne treba da dođe u kontakt sa očima. Ako se ovo dogodi, isperite oči sa puno vode.
- Čvrsto zatvorite bočicu posle svake upotrebe.
- Ne dodirujte kapaljku prstima.
- Budite sigurni da je zatvarač neoštećen pre prvog korišćenja proizvoda.
- Proizvod koristite najduže 90 dana posle prvog otvaranja.
- Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
- Ne koristite ovaj proizvod ako ste alergični na bilo koji njegov sastojak

### SASTAV:

Natrijum-hlorid, lauril-etar-sulfat, silika gel, titanijum-dioksid, borna kiselina, natrijum-tetraborat, dinatrijum-edetat 0.1% i poliheksametilen-bigvanid 0.001% u prečišćenoj vodi.

## Contasol GP rastvor za čuvanje


Rastvor za dezinfekciju i čuvanje gaspropusnih i tvrdih kontaktnih sočiva.

Contasol GP rastvor za čuvanje povećava kvašljivost sočiva što produžava udobnost nošenja kontaktnih sočiva.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Operite ruke.
2. Posle čišćenja sočiva Contasol GP rastvorom za čišćenje, napunite kasetu za sočiva Contasol GP rastvorom za čuvanje i ostavite sočiva u kaseti preko noći ili najmanje 6 sati. Kontaktna sočiva treba da budu u potpunosti pokrivena rastvorom.
3. Uzmite sočiva iz kasete i kratko ih isperite Contasol GP rastvorom za čuvanje pre nego što ih stavite na oko.
4. Ako imate potrebu da skidate sočiva u toku dana, pokvasite ih sa nekoliko kapi Contasol GP rastvora za čuvanje pre nego što ih ponovo stavite na oko.

### OPREZ

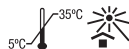

- Uvek koristite sveži rastvor za dezinfekciju kontaktna sočiva i uklonite rastvor koji je već korišćen.
- Čvrsto zatvorite bočicu posle svake upotrebe.
- Ne dodirujte kapaljku prstima.
- Budite sigurni da je zatvarač neoštećen pre prvog korišćenja proizvoda.
- Proizvod koristite najduže 90 dana nakon prvog otvaranja.
- Čuvajte van vidokruga i domašaja dece.
- Ne koristite ovaj proizvod ako ste alergični na bilo koji njegov sastojak.
- U slučaju iritacije oka, skinite sočiva, prestanite sa korišćenjem ovog rastvora i posetite odmah očnog lekara ili specijalistu za kontaktna sočiva
- Sočiva se mogu skladištiti u zatvorenoj kaseti za sočiva do 30 dana

### SASTAV

Natrijum-hlorid, borna kiselina, natrijum-tetraborat, hidroksipropil-metilceluloza, poloksamer, dinatrijum-edetat 0.1% i poliheksametilen-bigvanid 0.0004% u prečišćenoj vodi.

## Contasol GP Cleaner

Cleaner for gas-permeable and rigid contact lenses.

Contasol GP Cleaner is used for the daily cleaning of gas-permeable and rigid contact lenses.

The cleaning effect of Contasol GP Cleaner is guaranteed by small particles present in the solution, which eliminate deposits from the contact lens.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wash your hands.
2. Shake the bottle before each use.
3. Place the lens on the palm of your hand and apply a few drops of Contasol GP Cleaner to the lens.
4. Rub it carefully for about 10-20 seconds between your fingertips.
5. Rinse the lens thoroughly with Contasol GP Conditioner or saline solution to remove the Contasol GP Cleaner completely.
6. Fill the lens case with Contasol GP Conditioner and leave the lens there overnight or for at least 6 hours.

### PRECAUTIONS



- The product is not suitable for soft contact lenses.
- This solution should not come into contact with the eyes. If this occurs, wash them with plenty water.
- Close the bottle tightly after each use.
- Do not touch the dropper with your fingers.
- Check that the seal is intact before using the product for the first time.
- Use the product within 90 days after opening.
- Keep out of the reach and sight of children.
- Do not use this product if you are allergic to any of its ingredients.

### INGREDIENTS:

Sodium chloride, lauryl ether sulphate, silica gel, titanium dioxide, boric acid, sodium tetraborate, disodium edetate 0.1% and polyhexamethylene biguanide 0.001% in purified water.

## Contasol GP Conditioner


Conditioner solution for disinfecting and preserving gas-permeable and rigid contact lenses.

Contasol GP Conditioner's high wetting properties prolong comfort for contact lens wearers.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wash your hands.
2. After cleaning with Contasol GP Cleaner, fill the lens case with Contasol GP Conditioner and leave the lenses in the lens case overnight or for at least 6 hours. The contact lenses should be totally covered by the solution.
3. Remove the lenses from the lens case and rinse them briefly with Contasol GP Conditioner before putting them on.
4. If you need to take the lenses out during the day, wet them with few drops of Contasol GP Conditioner before putting them back on.

### PRECAUTIONS

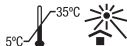

- Always use a fresh solution to disinfect the contact lenses and dispose of any solution already used.
- Close the bottle tightly after each use.
- Do not touch the dropper with your fingers.
- Check that the seal is intact before using the product for the first time.
- Use the product within 90 days after opening.
- Keep out of the reach and sight of children.
- Do not use this product if you are allergic to any of its ingredients.
- In the event of eye irritation, remove the lenses, stop using the product and see a doctor or a contact lens specialist immediately.
- The lenses can be stored in the closed lens case for up to 30 days.

### INGREDIENTS

Sodium chloride, boric acid, sodium tetraborate, hydroxypropyl methylcellulose, poloxamer, disodium edetate 0.1% and polyhexamethylene biguanide 0.0004% in purified water.



Disop  
Avda. Valdelaparra, 31-A.  
28108 Madrid, España



CE 0318

STERILE A