

Contasol Soft Elite

- VIŠENAMENSKI RASTVOR SA NATRIJUM HIJALURONATOM
- Čisti, uklanja proteine, dezinfikuje, vlaži i ispira
- Maksimalna hidratacija
- Produžena udobnost
- Za meka kontaktna sočiva uključujući i silikon hidrogel sočiva

Ovaj proizvod je višenamenski rastvor koji održava Vaša sočiva čistim i udobnim pomoću formule koja sadrži poloksamer i natrijum hijaluronat. Redovna upotreba pomaže eliminisanje proteinskih naslaga koje se skupljaju na kontaktnom sočivu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Operite ruke pre nego što pristupite rukovanju sočivima.
2. Skinite jedno kontaktno sočivo i isperite ga u trajanju od nekoliko sekundi.
3. Stavite tri ili četiri kapi višenamenskog rastvora na sočivo i čistite sočivo tako što ćete ga pažljivo trljati oko 20 sekundi.
4. Stavite dovoljno višenamenskog rastvora u kasetu za sočiva tako da kada je sočivo u kaseti, ono bude u potpunosti prekriveno tečnošću i zatim stavite u kasetu sočivo koje ste upravo očistili.
5. Skinite drugo kontaktno sočivo i ponovite isti postupak.
6. Ostavite kontaktna sočiva u zatvorenoj kaseti preko noći ili najmanje 6 sati da bi bila na odgovarajući način dezinfikovana.
7. Pre ponovne upotrebe sočiva, isperite ih nekoliko sekundi ovim rastvorom.

NEDELJNI ENZIMSKI TRETMAN

Ovaj višenamenski rastvor automatski uklanja

depozite proteina sa sočiva, i tako čini nepotrebnim nedeljno čišćenje enzimskim sredstvom. Ako ipak sočivo postane veoma prljavo, može biti neophodno da se očisti uz pomoć enzimskih tableta.

OPREZ



- Uvek koristite svež višenamenski rastvor. Uklonite iz kasete za sočiva sav rastvor preostao od prethodnog dana.
- Kada nije u upotrebi bočica mora biti čvrsto zatvorena. Izbegavajte kontakt kapaljke bočice sa bilo kojom površinom.
- Budite sigurni da zaštita na zatvaraču nije oštećena pre prvog korišćenja proizvoda. Nakon prvog otvaranja, koristite najduže 90 dana.
- Držite ovaj proizvod van domašaja dece
- Ne koristite ovaj proizvod ako ste alergični na bilo koji njegov sastojak
- U slučaju konstantne neudobnosti ili iritacije, skinite sočiva, prestanite sa upotrebom ovog proizvoda i konsultujte svog oćnog lekara ili specijalistu za kontaktna sočiva
- Sočiva se mogu čuvati u zatvorenoj kaseti za sočiva do 30 dana

SASTAV

Natrijum-hlorid, borna kiselina, natrijum-tetaborat, natrijum-citrat, poloksamer 407, hijaluronska kiselina, dinatrijum-edetat 0.02% i poliheksametenil-bigvanid 0.0001% u prečišćenoj vodi.



Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A.
28108 Madrid. España



CE 0318

STERILE A

Ovlašćeni predstavnik: Ortolens d.o.o, Milutina
Smiljkovića 1a, Leskovac, Srbija
R. br. 515-02-05440-22-004

Contasol Soft Elite

- MULTIPURPOSE SOLUTION WITH SODIUM HYALURONATE
- Cleans, eliminates proteins, disinfects, wets and rinses
- Maximum hydration
- Prolonged comfort
- For soft contact lenses including silicone hydrogel

This product is a multipurpose solution that keeps your lenses clean and comfortable with its formula that contains poloxamer and sodium hyaluronate. Regular use helps to eliminate the protein deposits that accumulate on the contact lens.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. Wash your hands before handling the lenses.
2. Remove one of the contact lenses and rinse it for a few seconds.
3. Add three or four drops of multipurpose solution to the lens and clean it by rubbing the lens gently for about 20 seconds.
4. Add enough multipurpose solution to the lens case so that when the lens is inserted it will be totally covered by the liquid, and then insert the lens you have just cleaned.
5. Remove the other contact lens and repeat the same process.
6. Leave the contact lenses in the closed case overnight or for at least six hours to obtain proper disinfection.
7. Before using the lenses again, rinse them for a few seconds with the product.

WEEKLY ENZYMATIC CLEANING

This multipurpose solution automatically

eliminates protein deposits on the lenses, making weekly enzyme cleaning unnecessary. However, if lenses become very dirty, it may be necessary to clean them with enzyme tablets.

PRECAUTIONS

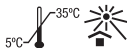

- Always use fresh multipurpose solution. Discard any solution remaining in the lens case from the previous day.
- Keep the bottle tightly closed when not in use and avoid contact between the dropper and any surfaces.
- Make sure the seal is not broken before using the product for the first time. Once open, use within 90 days.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients.
- In the event of persistent discomfort or irritation, remove the lenses, stop using the product, and consult your contact lens specialist.
- The lenses can be stored in the closed lens case for up to 30 days.

INGREDIENTS

Sodium chloride, boric acid, sodium tetraborate, sodium citrate, poloxamer 407, hyaluronic acid, disodium edetate 0.02% and polyhexamethylene biguanide 0.0001% in purified water.



Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A.
28108 Madrid. España



CE 0318

STERILE A